




MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA NOHY 24260



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prosím, pozorně si přečtěte tento návod před použitím.

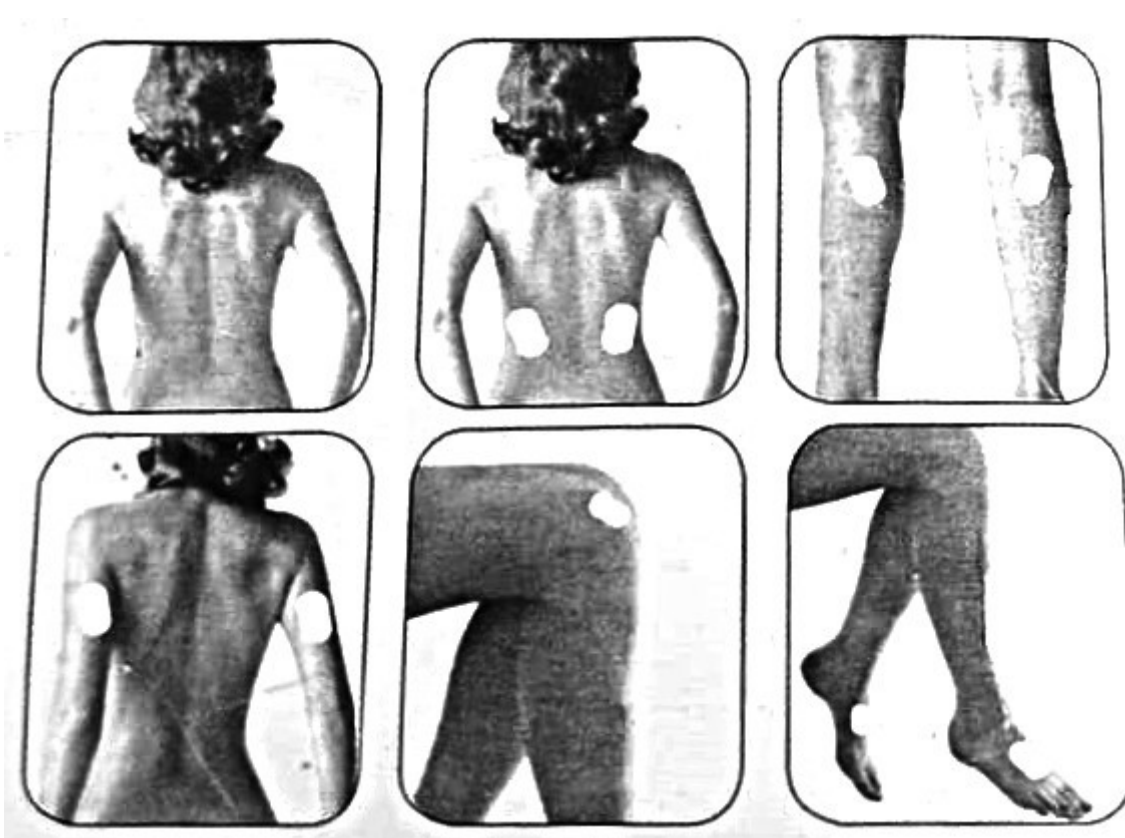


Externí pulzní elektroda

1. Zasuňte jeden konec dvoužilového spojovacího vodiče do pulzního konektoru na hlavní zařízení (viz Obrázek 2) a externí druhý konec ke dvěma destičkám.
2. Odstraňte ochranné pomůcky z elektrody, přiložte ji na bolestivé místo a zapněte režim EMS pulzu.
3. Po použití vraťte další ochranné fólie zpět na elektrodu a uložte ji na suché a větrané místo pro použití.
4. Elektrody by měl být čistý povrch, aby se zjistilo znečištění prachu, olejem nebo jinými látkami, které snížily přilnavost. Pokud je povrch čistý znečištění, omyjte jej a po uschnutí znovu použijte vodu.
5. Elektroda může být použit přibližně 80krát (po 20 minutách na jedno použití). Pokud elektroda po opakovaném čištění ztratí přilnavost, je nutné ji vyměnit a zakoupit novou u prodejce nebo výrobce.
6. Používejte pouze speciální elektrody určené pro tento produkt. Nepoužívejte elektrody jiných modelů nebo specifikací.

Úvod k produktu

Multifunkční masážní přístroj na nohy využívá moderní technologické principy, jako je teplo, nízkofrekvenční elektrické pulzy, protahování šlach a další funkce. Tento přístroj je navržen tak, aby poskytoval masáž chodidel, lýtek a dalších částí těla. Reflexní účinek je dosažen prostřednictvím EMS elektrických pulzů, kombinovaných s teplem, a pomáhá podporovat místní krevní oběh, zmírňuje bolest a pronájem k tvarování těla.

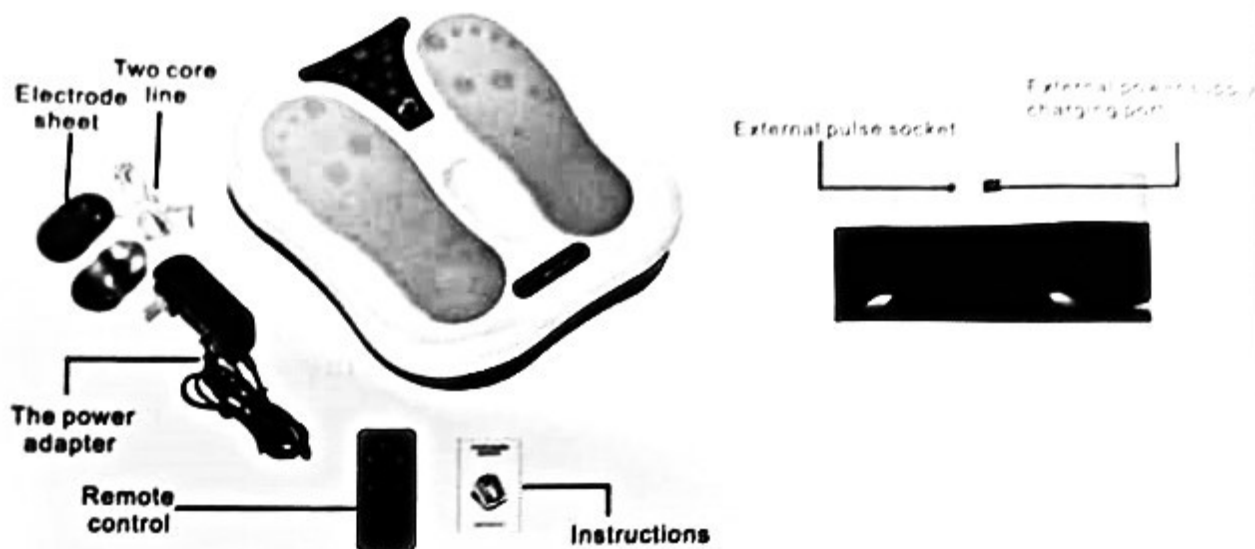


Obsah balení

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Dálkové ovládání (volitelné)
- Externí elektrody (s připojovacím kabelem)
- Uživatelský manuál

Panelová zařízení

1. **Tlačítko "IO"**: Dlouhé stisknutí zapíná/vypíná zařízení.
2. **Tlačítko "M"**: Výběr režimu (EMS má 15 možností).
3. **Nastavení intenzity**: 50 úrovní (nastavení pomocí "+" a "-" a zobrazeno na digitálním displeji).
4. **Časovač**: dobu na 15, 30, 45 nebo 60 minut.
5. **Tlačítko "S"**: Zapnutí/vypnutí funkce ohřevu s nastavením cyklů ve čtyřech úrovních.

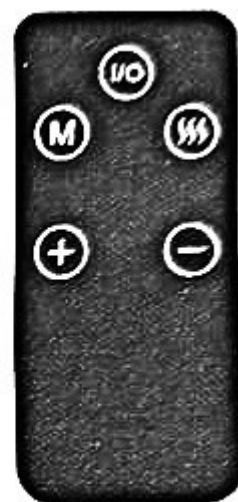

Jednoduché řešení problémů

1. Zařízení se nezapne:

- **Příčina:** Baterie je vybitá.
- **Řešení:** Baterii nabijte.

2. Zařízení nelze spustit:

- **Příčina:** Nesprávné připojení napájení nebo vadný adaptér.
- **Řešení:** Připojte připojení a připojení k externímu zdroji energie.

3. Ohřev (moxibustion) nefunguje:

- **Příčina:** Nesprávné nastavení.
- **Řešení:** Přejděte do režimu nastavení, snižte hladinu.

4. Brnění na chodidle nebo noze:

- **Příčina:** Příliš vysoká pracovní intenzita.
- **Řešení:** Snižte pomocí nastavení.

Upozornění:

Nepokoušejte se se zařízení rozebírat nebo opravovat sami. Kontakt s vnitřními částmi zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Jakékoliv opravy by měly být provedeny pouze autorizovaným servisním centrem. Jakékoli neautorizované zásahy vedou ke ztrátě záruky.

Technické parametry

- **Napájení:** 100–240 V AC, 50/60 Hz
- **Baterie:** Dobíjecí lithiový akumulátor, 150 mAh
- **Režimy EMS:** 15 režimů
- **Nastavení intenzity:** 50 úrovní
- **Ohřev (moxování):** Tři nastavení
- **Časovač:** 15, 30, 45, 60 minut
- **Kvalita produktu:** První t
- **Norma:** GB4

Metoda použití

1. Příprava před použitím:

- Vyčistěte pokožku nohou a místo použití vlhkého ručníku.
- vhodné se, že chodidla jsou suchá a elektrody čisté.
- Umístěte chodidla na povrch zařízení podle návodu.

2. Režim EMS (elektroterapie):

- Používám různé masážní techniky: stlačování, tlačení, hnětení, mačkání, ťukání, tahání a další.
- Stiskněte a podržte tlačítko „I/O“ pro zapnutí. Výchozí nastavení: režim 1 | síla 0 | čas 15 minut.
- Nastavení: pomocí tlačítek "+" a "-" upravte režim, terapii a čas.

3. Režim horké moxování (teplá terapie):

- **Poznámka:** Tento režim vyžaduje adaptér a nelze jej používat na baterie.
- Zapněte tlačítko „\$\$“ (indikátor zůstává zapnutý). K dispozici jsou 3 teplotní úrovně: nízká, střední, vysoká.
- **Teploty:**
 - Nízká (42 °C): Pro osoby s vysokou citlivostí na teplo.
 - Střední (46–48 °C): Pro běžné uživatele.
 - Vysoká (50 °C): Pro osoby s nízkou citlivostí na teplo nebo silnou silnou.

Upozornění:

Osoby s citlivou pokožkou by měly mít potíže způsobené vysokou teplotou.

Záruční podmínky


- Tento produkt má záruku 1 rok od data prodeje (pouze na nepoškozený produkt).
- Záruka pokrývá problémy způsobené hardwarovou nebo softwarovou poruchou normálního použití.
- Společnost není odpovědná za jakékoli jiné ztráty způsobené selháním produktu.

Podmínky záruky

1. Záruční doba: 1 rok.
2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady při běžném používání.
3. Servis v rámci záruky je poskytován zdarma.
4. **Výjimky:**
 - Fyzické poškození (pád, deformace, tlak).
 - Nedodržení návodu k použití nebo nevhodné skladování.
 - Poškození způsobené nehodami nebo lidskými faktory.
 - Neoprávněné rozebrání nebo údržba produktu.
 - Pokud zařízení nelze používat z jiných důvodů než technických vad, bude oprava účtována podle nákladů.

Certifikát

- **Název produktu:** Multifunkční masážní přístroj na nohy
- **Model:** KL-808
- **Kontrolor:** 03
- **Stupeň kvality:** První třída

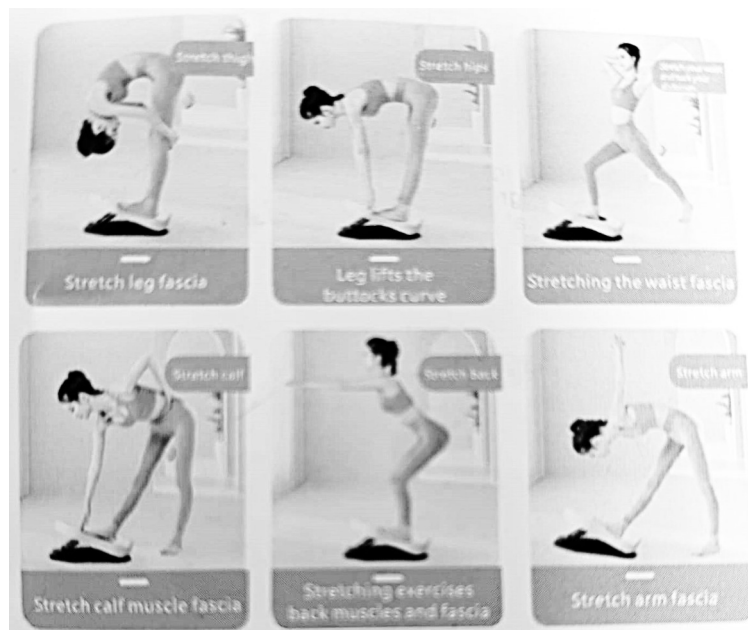

Cvičení a výhody

1. Napřimte hrudník a břicho, vytvarujte nohy a aktivujte svaly i kosti.
2. Používejte protahovací režim, abyste se uvolnili svaly celého těla a abyste si užili zdravý životní styl.
3. Po masáži se zaměřte na protahování šlach a snižování kyselých otoků a edémů.
4. Cvičte 15 minut denně, abyste se uvolnili svaly nohou, protáhli Achillovy šlachy a zcela přirozeně tlak.
5. Profesionální nastavení v 10 úrovních, které jsou v souladu s víceúhlovým protahovacím cvičením pro lidské tělo a splňuje potřeby různých skupin.